


Hoe vul ik een Mastatest® cartridge?




Neem een schoon melkstaal (bekijk de instructievideo).




Trek schone handschoenen aan en neem de cartridge uit de verpakking.

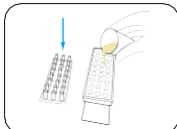


Verwijder het deksel van de cartridge en vul de cartridge voor de helft met melk.

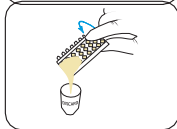


Giet de overtollige melk af en gooi weg.

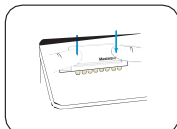

Plaats het deksel terug en druk stevig aan. Label het deksel met de koegegevens.

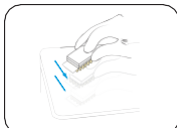

Tik 2-3 keer stevig, herhaal indien er luchtbellen zichtbaar zijn in de wells.

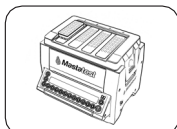

Plaats de cartridge in de Lapbox met de pijlen naar achteren gericht en plaats het deksel terug.



vetoquinol-mastatest.com/how-to-use

Deutsch, Français, English, Español, Italiano, Portuguese, Polski, Nederlands

Hoe start ik de Mastatest®?

Om te beginnen:

- Selecteer in het hoofdmenu van de Lapbox **Start Mastatest**
- Selecteer de gebruikte Lapbox positie: indien eerste vrije positie gebruikt of scroll om te selecteren en druk

Optie 1: BoxStart

- Selecteer testtype:
 - Voor de Klinische cartridge
 - Voor de HiSCC cartridge
- Selecteer **BoxStart**
- Geef het koenummer in (bv. 00123) en scroll om het kwartier te selecteren
- Start bevestigen

Optie 2: QuickStart

- Scroll omlaag om het testtype te selecteren:
 - Voor de Klinische cartridge **QuickCM**
 - Voor de HiSCC cartridge **QuickSCC**
- Voer de testgegevens binnen 21 uur in op vetoquinol.mastatestsystem.com

Volgende stappen:

- Aftelklok toont de resterende tijd.
- Resultaten worden gemaïld binnen de 24 uur
- Verdere testen kunnen onafhankelijk gestart worden



Mastatest