


Preencher um cartucho Mastatest®




Recolha uma amostra de leite limpa (ver vídeos de utilizador)

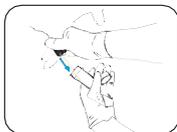

Coloque luvas limpas e retire o cartucho da embalagem



Retire a tampa do cartucho e encha-o até meio com leite

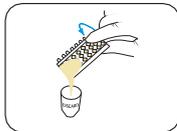

Retire o excesso de leite



Volte a colocar a tampa, empurrando-a firmemente para baixo, e etiquete a tampa com os dados relativos à vaca



Bata firmemente 2-3 vezes, repetindo a operação se forem visíveis bolhas de ar nos poços



Insira o cartucho na Lapbox™ com as setas viradas para trás e volte a colocar a tampa



vetoquinol-mastatest.com/how-to-use

Deutsch, Français, English, Español, Italiano, Portuguese, Polski, Nederlands

Iniciar o Mastatest®

Para começar:

- No menu inicial da Lapbox, seleccione *Iniciar Mastatest*
- Seleccione a posição utilizada: Se for a primeira, pressione ou pressione para seleccionar a correcta e

Opção 1: BoxStart

- Seleccione o tipo de teste:
 - Para Clínico
 - Para HiSCC
- Seleccione *BoxStart*
- Coloque o número da vaca (ex: 00123) e pressione para seleccionar o quarto
- Confirmar início

Opção 2: QuickStart

- Deloque para baixo para seleccionar o tipo de teste :
 - Para Clínico *QuickCM*
 - Para HiSCC *QuickSCC*
- Introduza os dados do teste em vetoquinol.mastatestsystem.com no prazo de 21 hrs

Próximos passos:

- O temporizador de contagem decrescente mostra o tempo restante
- Resultados enviados por email no prazo de 24 horas
- Podem ser iniciados outros testes de forma independente